

ESTERILLA PARA MAGNETOTERAPIA DE BAJA FRECUENCIA

Globus presenta un nuevo accesorio para la magnetoterapia que puede utilizarse con todos los aparatos Magnum.

La nueva **MAT 100** es una esterilla que contiene cuatro solenoides y permite tratar una superficie muy amplia sin tener que aplicar en el cuerpo los difusores tradicionales.

FUNCIONAL: **Mat 100** puede utilizarse con gran facilidad en el sofá, en la cama o en una silla, apoyando en ella la parte del cuerpo que hay que tratar.


CONFORTABLE: Mat 100 está formada por más estratos de material blando. De esta manera se uniforma la superficie y no se percibe el espesor de los solenoides contenidos en su interior.

MAT 100 puede utilizarse sola o puede unirse de manera muy simple a otras esterillas (**E-MAT y N-MAT**), hasta formar un verdadero y propio colchón que mide 70 cm de anchura y 176 cm de longitud.


INSTRUCCIONES DE USO

Las esterillas para la magnetoterapia Globus contienen cuatro solenoides, con el lado norte situado en la parte delantera de la esterilla y el lado sur en la parte posterior.

Parte delantera: lado donde hay que apoyar la parte del cuerpo

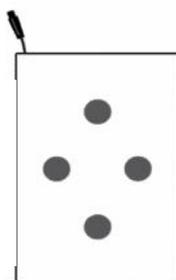


Parte posterior

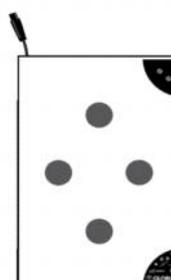


Mat 100

La esterilla Mat 100 contiene cuatro solenoides y a través del conector puede conectarse directamente con el aparato Magnum que usted tiene.


Conector que debe insertarse en el aparato Magnum

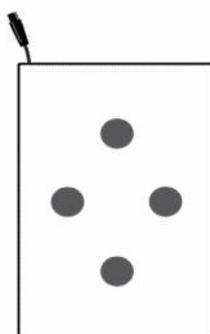

Para conectar la esterilla Mat 100 con el aparato, inserte el conector en su alojamiento, colocado en la parte superior de la unidad (véase la foto de abajo). El cable debe insertarse con las ranuras hacia abajo.

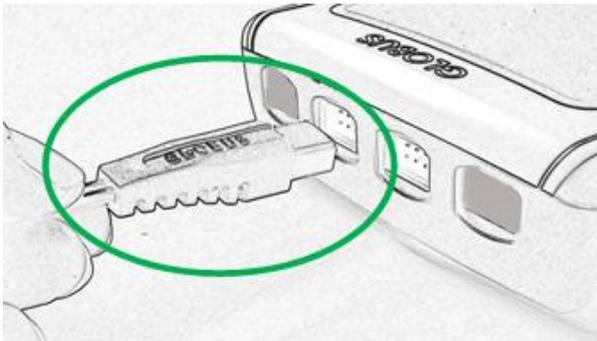


OK

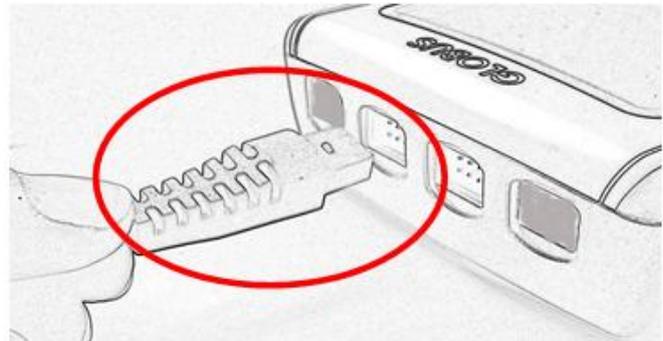


NO

E-Mat 100


La esterilla E-Mat 100 debe considerarse una extensión de la esterilla Mat 100, ya que puede conectarse con esta a través de dos pequeños cables de conexión. De esta manera, el campo magnético suministrado por cada canal del aparato Magnum se distribuye en las dos esterillas, aumentando muchísimo la superficie tratada.

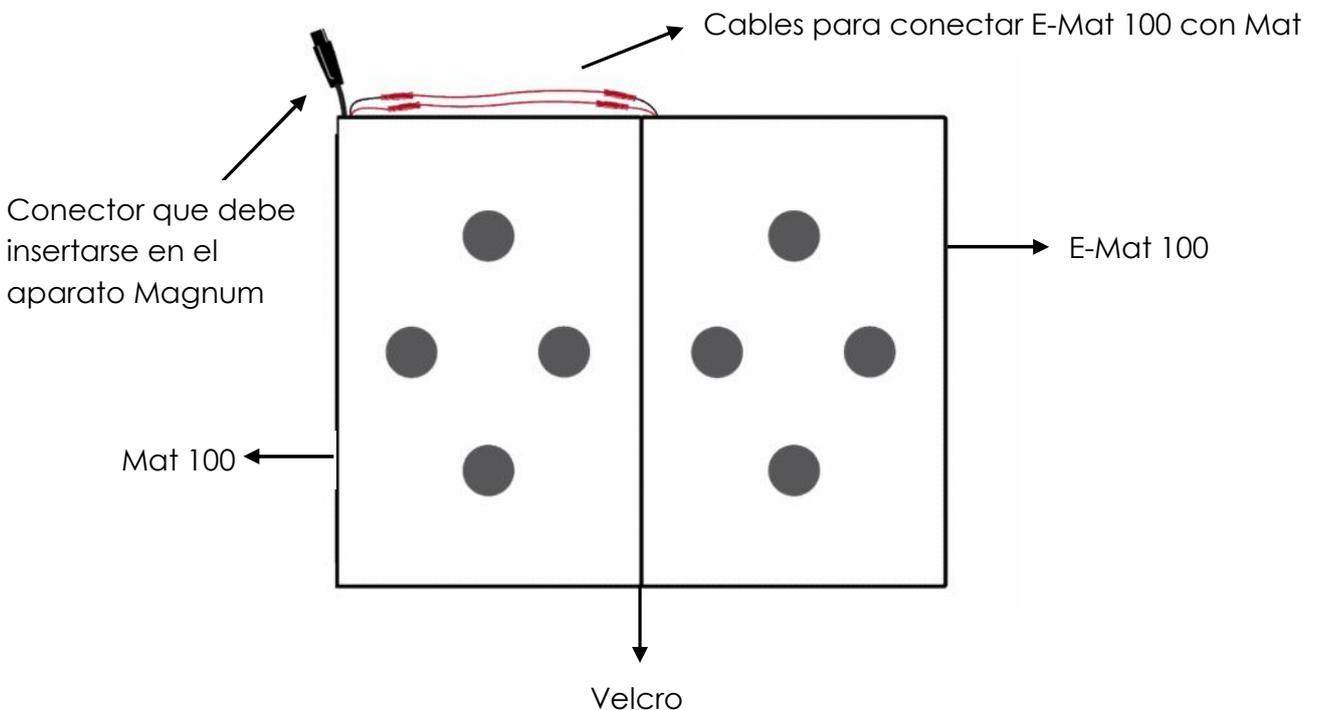


Para conectar las dos esterillas debe hacer como sigue:

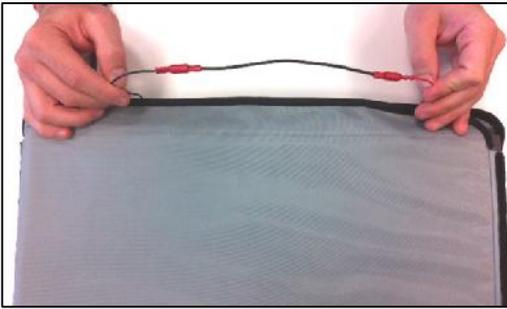


Abra el velcro del lado corto de la Mat 100 y saque el cable pequeño como se ve en la foto

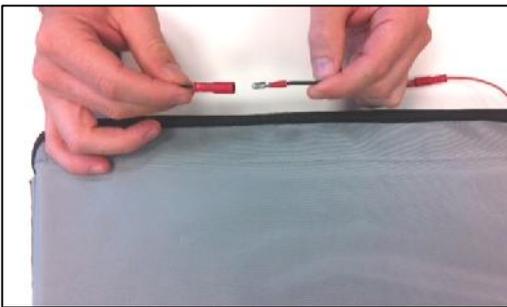


Separe uno de los dos conectores que cierran el circuito

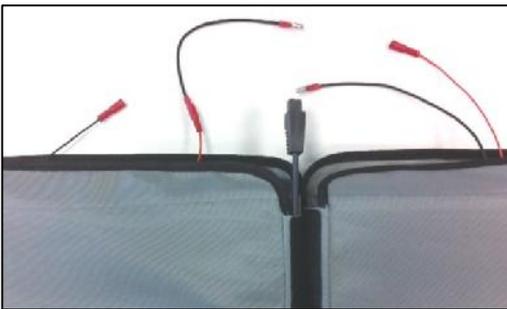

Acerque y una la extensión E-Mat 100 a través del velcro y extraiga los cables pequeños por el lado más corto

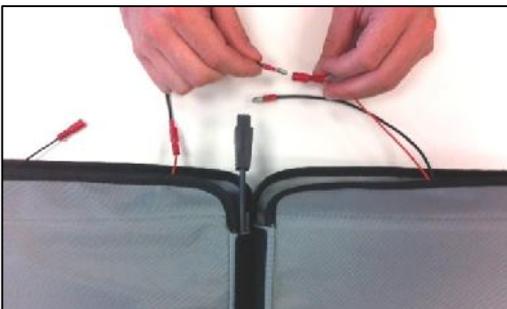

Conecte los conectores macho y hembra de la Mat 100 respectivamente con los conectores hembra y macho de la E-Mat 100

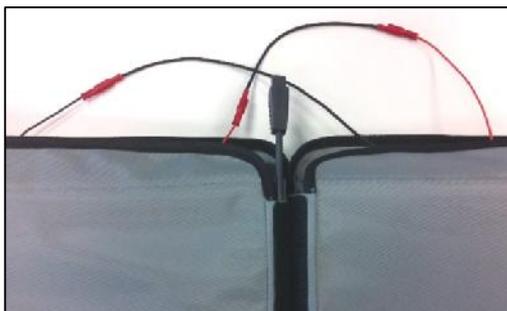

Conexión correcta



Introduzca otra vez todos los cables dentro de las esterillas y cierre el velcro

N-Mat

La esterilla N-Mat es una esterilla neutra que no contiene ningún solenoide. N-Mat se utiliza para formar un plano de apoyo continuo en la composición de las colchonetas B-Mat.

COLCHONETAS B-MAT

Las colchonetas B-Mat pueden utilizarse con todos los aparatos Magnum, a excepción del Magnum L.

La B-Mat es una verdadera y propia colchoneta formada por 4 secciones intercambiables. Cada sección puede contener 4 solenoides.





Bed Mat está pensada para ser colocada sobre el tradicional colchón de la cama, permitiendo efectuar así los tratamientos de magnetoterapia durante las horas de descanso.

Bed Mat utiliza los beneficios de los campos magnéticos para tratar los principales trastornos musculoesqueléticos como la artrosis, la osteoporosis, la artritis, etc.


La colchoneta permite actuar en todo el organismo. Por lo tanto, es especialmente apta para mejorar la densidad ósea de personas que padecen osteoporosis y mejorar los síndromes dolorosos del aparato musculoesquelético que afectan a más partes del cuerpo.

B-Mat está disponible en tres versiones:


- B-Mat 200
 - B-Mat 300
 - B-Mat 400
- **B-Mat 200:** la colchoneta está formada por dos secciones activas que contienen en total 8 solenoides y dos secciones neutras sin solenoides. Esta composición puede utilizarse colocando las secciones activas según las necesidades. A continuación se muestran algunos ejemplos.

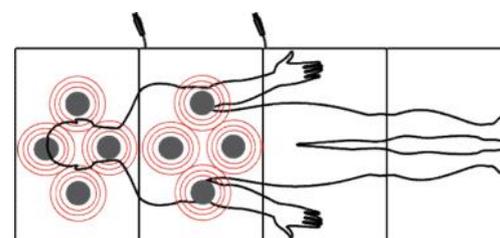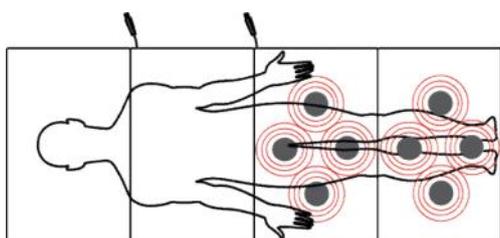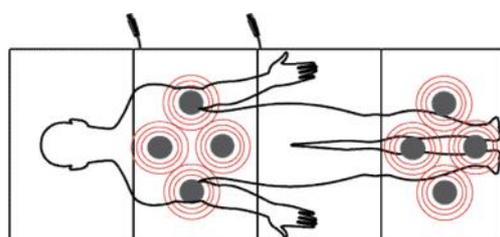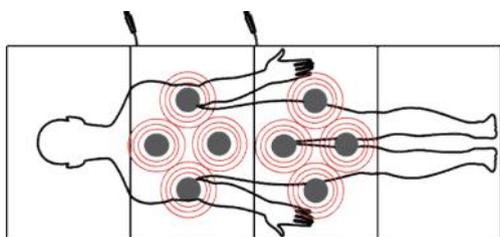

- **B-Mat 300:** la colchoneta está formada por tres secciones activas que contienen en total 12 solenoides y una sección neutra sin solenoides. Esta composición puede utilizarse colocando las secciones activas según las necesidades. A continuación se muestran algunos ejemplos.

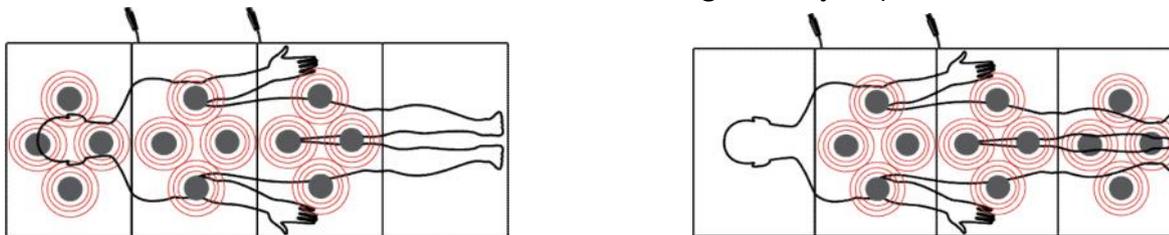

- **B-Mat 400:** la colchoneta está formada por cuatro secciones activas que contienen en total 16 solenoides.

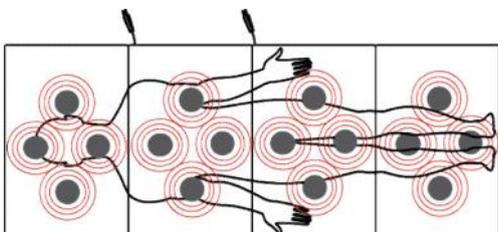

Para formar la colchoneta hay que unir más esterillas. Esto es posible acercando los lados largos de cada esterilla, para luego unirlos a través del velcro. Durante esta operación, preste atención en que la parte delantera de todas las esterillas esté dirigida hacia la misma dirección.




La colchoneta B-Mat puede colocarse sobre el tradicional colchón de la cama. Aconsejamos cubrirla con un cubrecolchón y una sábana, para que sea aún más cómoda.

El lado de la colchoneta con los cables debe colocarse en el borde exterior de la cama, para poder conectar fácilmente el aparato Magnum.

Cuidado: la superficie de la colchoneta debe ser llana. De lo contrario, es necesario controlar que las bobinas contenidas en ella se hayan colocado correctamente.

Procedimiento: coloque la esterilla en una superficie llana y abra el velcro desde la parte del lado corto. Introduzca la mano entre los estratos internos, hasta encontrar la bobina que se ha desplazado, y vuelva a colocarla en su cavidad. Durante esta operación, controle que el lado norte (indicado en la superficie del solenoide con la letra N) esté situado hacia la superficie anterior de la colchoneta.

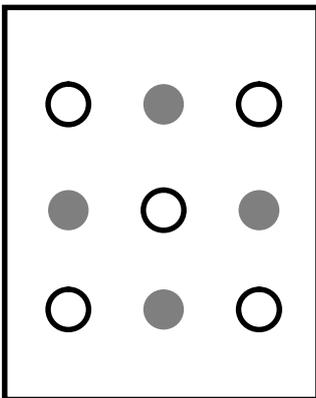

El esquema de al lado muestra la posición de las 4 bobinas (indicadas en gris) dentro de la esterilla.